


Masážní pistole Symfony Pulse Lite



Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt! Pro správné použití si před použitím pečlivě přečtěte tento návod.

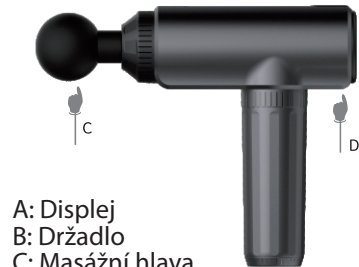

A: Displej
B: Držadlo
C: Masážní hlava
D: Nabíjecí USB-C port

30 Ukazatel rychlostí (1-30)

99 Ukazatel stavu baterie

- ⏻ ON/OFF tlačítko, pro zapnutí podržte po dobu 2 sekund
- + Zvýšení rychlosti
- Snížení rychlosti



Ball head	Triangle head	Bullet head	Flat head	Fork head	Thumb head
Pro velké svalové skupiny: záda, hrudník, boky	Pro záda, uvolnění svalů	Pro hlubokou tkáň šlach, kloubů, dlaní, chodidel	Pro jakoukoli část těla	Na krk, páteř, rameno	Pro nohy, měkké tkáně

Použití hlavice:

Vložte hlavici a lehce ji otočte, abyste ji uvolnili. Nevkládejte ani nevyjímajte násilím.

Při instalaci masážní hlavice ji vyrovnejte s výrobkem a pevně zatlačte do přesné polohy.



Vlastnosti produktu:

Název	Masážní pistole Symphony	Model	Pulse Lite
Váha	800g	Rozměry	178x198x62mm
Materiál	ABS	Počet rychlostí	30 rychlostí
Kapacita baterie	2600mAh	Masážní hlavice	6 ks
Napětí	12V	Amplituda	8 mm
Výkon	24W	Nabíjecí napětí	5V
Max. otáčky	6600±12% otáček/min (bez zatížení)	Doba nabíjení	cca. 4 hod
Ochrana	Automatické vypnutí po 15 minutách provozu	Výdrž baterie	cca. 6 hodin

Varování

Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte tento návod

1. Pouze pro dospělé. V případě že máte nějaké zranění tak zařezání nepoužívejte.
2. Při používání udržujte pokožku v suchu. Nedoporučuje se používat, na mokré pokožce.
3. Nevkládejte prosím tento výrobek do vody. Věnujte prosím pozornost tomu, aby byl větrací otvor suchý.
4. Nevhazujte tento výrobek do ohně. Uchovávejte mimo dosah míst nebo předmětů s vysokou teplotou.
5. Výrobek nerozebírejte.
6. Nepoužívejte jej nepřetržitě déle než 1 hodinu. Před dalším použitím by měl být interval alespoň 30 minut.
7. Pokud dojde k nežádoucí reakci, okamžitě přestaňte tento produkt používat

Nabíjení

1. Tento produkt vyžaduje výstup 5V 1A-2A USB pro nabíjení, pokud použití adaptéru s jinými specifikacemi může vést k selhání nabíjení nebo poškození.
2. Když je zbývající kapacita baterie menší než 20, blikání indikuje nabíjení. Zobrazuje se krok za krokem podle polohy převodu. Když je baterie nabitá na „99“. Pomalu přejde do režimu udržovacího nabíjení. Když přestane blikat. To znamená, že baterie je plně nabitá.
3. Pokud je energie nedostatečná, nabíjte ji prosím včas. Nepoužívejte jej, dokud není zcela mrtvý.
4. Nepoužívejte tento výrobek při nabíjení.
5. Když se produkt nepoužívá, měl by se jednou za měsíc dobít a může být po dlouhou dobu v pohotovostním režimu.

Návod k použití

1. Stisknutím a podržením tlačítka napájení na 2 sekundy spustíte stroj.
2. Po stisknutí + se intenzita masáže zvýší a maximum je 30.
3. Stiskněte - pro snížení intenzity masáže.
4. Opakovaně stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund
5. Pokud jej budete používat nepřetržitě po dobu 10 minut, rukojeť se postupně zahřeje. V tomto okamžiku prosím vypněte stroj v intervalu 30 minut, než jej znovu použijete.

Údržba, čištění a skladování

1. Otřete čistou měkkou utěrkou, nepoužívejte alkohol ani jiná organická chemická rozpouštědla.
2. Neumísťujte tento výrobek na místo s vysokou teplotou a vlhkostí, ale udržujte jej na dobře větraném místě.
3. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, udržujte jej v čistotě a jednou za měsíc nabíjte.
4. Udržujte jej mimo dosah dětí a domácích zvířat.